

concept

IPL epilátor PERFECT SKIN



IL3000

CZ

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	Vstup: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A
	Výstup: 12 V, 3 A
Příkon	36 W
Aplikační plocha	3 cm ²
Světelné spektrum	550-1200 nm
Frekvence impulzů	Stupeň intenzity 1 - impulzy po 1,6 s
	Stupeň intenzity 5 - impulzy po 3,6 s
Intenzita světelného impulzu	Stupeň intenzity 1 - 2 J/cm ²
	Stupeň intenzity 2 - 2,5 J/cm ²
	Stupeň intenzity 3 - 2,8 J/cm ²
	Stupeň intenzity 4 - 3,2 J/cm ²
	Stupeň intenzity 5 - 3,5 J/cm ²
Životnost lampy	300 000 impulzů

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím epilátoru si pečlivě přečtete bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi. Pokud si nejste jistí, zda můžete epilátor použít, nebo máte pochybnosti o jeho použití

a rizicích z nich plynoucích, obraťte se na svého dermatologa či praktického lékaře.

- Stejnou část pokožky neošetřujte častěji než jednou za 2 týdny. Častější ošetření výsledek nezlepší, naopak zvýšíte riziko vzniku nežádoucích účinků.
- Počkejte, dokud se postižená oblast nezahojí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na dětskou pokožku ani nedovolte dětem, aby spotřebič používaly.
- Pozor: Horký povrch. Nedotýkejte se prsty čocky na povrchu aplikátoru. Rovněž zajistěte, aby byl povrch spotřebiče čistý.
- Na ošetřovanou pokožku nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfému, deodorantu nebo jiných přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton. Použitím spotřebiče může dojít k dočasné změně pigmentace (viz kapitola Možné nežádoucí účinky).
- POZOR! Plastové obaly použité na obalení spotřebiče mohou být nebezpečné. Obaly udržujte mimo dosah malých dětí. Obaly nepoužívejte v postýlce, dětské posteli, kočárku ani v ohrádce. Tenký film se nalepí na nos a ústa a omezí dýchání. Plastový obal není hračka.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně, ujistěte se, že jste ho po použití odpojili ze zásuvky. Umístění

blízko zdroje vody může být nebezpečné, i když je spotřebič vypnutý. Pro zajištění další ochrany doporučujeme do elektrického obvodu, který napájí koupelnu, instalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl na zem nebo se zdá, že je poškozený.
- Epilátor je elektrický spotřebič a nesmí přijít do styku s vodou.
- Spotřebič neskladujte na místě, ze kterého by mohl spadnout na zem, do vany, umyvadla nebo do jakékoli jiné nádoby s kapalinou. Spotřebič neponořujte do vody ani do jiné kapaliny. To by mohlo způsobit vážný úraz elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud se zrovna koupete ve vaně.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je mokrý či vlhký.
- Na spotřebič nesahejte, pokud spadl do vody.
- Pokud spotřebič spadl do vany, okamžitě ho vypojte ze zásuvky.
- Nepokoušejte se spotřebič sami otevřít ani opravit. Otevřením spotřebiče se vystavíte nebezpečným elektrickým součástem a energií

pulzního světla, což může způsobit vážné zranění nebo nevratné poškození očí.

- Spotřebič může opravit pouze autorizovaný servis.
- Pokud spotřebič přestal pracovat, je poškozený nebo potřebuje opravu, kontaktujte náš zákaznický servis.
- Spotřebič používejte pouze k tomu, k čemu je výrobcem navržen, a dodržujte pokyny uvedené v návodu.
- Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapojený v zásuvce.
- Spotřebič nezapojujte do zásuvky, pokud má poškozený přívodní kabel. Kabel udržujte mimo dosah všech zdrojů tepla.
- Spotřebič přestaňte používat, pokud si všimnete nějaké vady, nebo pokud se zdá přístroj poškozený či vydává nepřírodní zvuk či zápach. Spotřebič přestaňte okamžitě používat především tehdy, je-li lampa prasklá či znečištěná.
- Začne-li indikátor On/Off/Ready svítit červeně, přestaňte spotřebič používat a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Ihned po použití spotřebiče odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Před čištěním spotřebič vždy nejprve vypojte ze

zásuvky

- Používejte pouze příslušenství, které je doporučeno výrobcem.
- K provozu spotřebiče používejte pouze výrobcem dodaný adaptér.
- Epilátor nepoužívejte:
 - pokud je vaše pokožka přirozeně tmavá.
 - na opálenou pokožku, nebo pokud jste se v nedávné době opalovali. Nevystavujte se slunečnímu záření 4 týdny před použitím epilátoru a 2 týdny po jeho použití.
 - na bílé, šedé nebo světlé chloupky. Odstraňování chloupků epilátorem není tak efektivní, pokud jsou chloupky bílé či světlé.
 - na pokožku hlavy, obočí, bradu, v blízkosti očí, uší, nosu, bradavek, genitálií, konečníku ani na místa s různými znaménky, pihami, mateřskými znaménky, bradavicemi, modřinami, vyrážkou, tetováním nebo permanentním make-upem apod.
 - pokud jste těhotná nebo kojíte.
 - pokud jste v předešlých 28 dnech byli dlouhodobě vystaveni slunci nebo UV záření.
 - při výskytu červených žilek a křečových žil.
 - pokud máte ekzém, lupénku, léze, otevřené rány nebo rozvíjející se infekci v místě, které chcete ošetřit. Počkejte, dokud se postižená

oblast nezahojí.

- pokud máte sklony k tvorbě keloidů, trpíte citlivostí na světlo (fotosenzitivita) nebo citlivostí na léky, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyklin, fenothiazin, thiazidy, diuretika, sulfonylurea, sulfamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa hydroxykyseliny (AHA), beta hydroxykyseliny (BHA) nebo retinoidy (isotretinoin, tretinoin).
- pokud jste byli nedávno léčeni nebo jste léčeni alfa hydroxykyselinami (AHA), beta hydroxykyselinami (BHA), retinoidy nebo kyselinou azelaovou.
- pokud trpíte abnormalitami kůže způsobenými například cukrovkou nebo jiným systémovým či metabolickým onemocněním.
- pokud jste v posledních 6 měsících podstoupili léčbu isotretinoinem.
- pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidy.
- pokud se na místě, které se chystáte ošetřit, objevují příznaky pásového oparu, jestliže jste to nejprve nekonzultovali s lékařem a nezahájili jste preventivní léčbu.
- pokud trpíte epilepsií.
- pokud máte aktivní implantát, jako je


kardiostimulátor, implantát proti inkontinenci moči nebo inzulinovou pumpu apod.

- pokud trpíte poruchami spojenými s fotosenzitivitou, jako je porfyrie, polymorfní světlá erupce, sluneční kopřivka nebo lupus.
- pokud máte předpoklady k rakovině kůže nebo ke zhoubnému kožnímu bujení.
- pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili radioterapii nebo chemoterapii.
- pokud trpíte jakýmkoliv jiným onemocněním, které váš lékař považuje za rizikové pro ošetření epilátorem.
- Spotřebič mohou používat osoby starší 18 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí a volby úrovně intenzity
2. Indikátor připravenosti
3. Úroveň intenzity
4. Tlačítko uvolnění impulsu

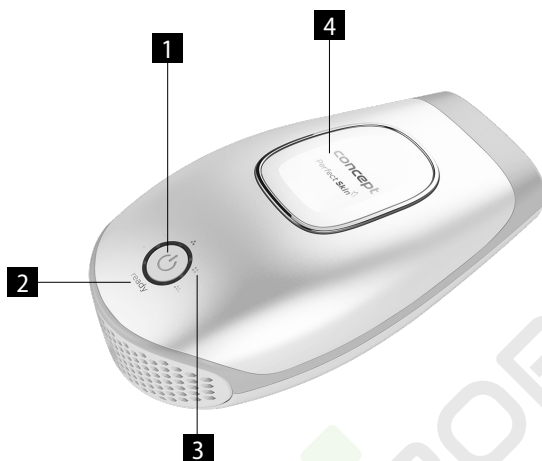


POUŽITÍ

Technologie epilace IPL epilátorem je dobře známá a propracovaná. Byla podrobena více než 15 letům klinických testů po celém světě, během nichž byla prokázána efektivita a bezpečnost v dlouhotrvajícím odstraňování chloupků.

Technologie IPL epilace je založena na teorii selektivní fototermolýzy, která k zastavení růstu chloupků používá energii optického záření. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného efektu, je třeba, aby vlasový kořínek selektivně absorboval tepelnou energii a přeměnil ji na teplo. Těto selektivity je dosaženo tím, že většinu energie optického záření absorbuje pigment vlasové cibulky, zatímco okolní pokožka a tkáň zůstávají chladné. Tento tepelný účinek bezbolestně ničí chloupky i s kořínky a zabráňuje jejich opětovnému růstu. Tato vědecky ověřená technologie poskytuje rychlé a trvalé výsledky.


Množství pigmentu v pokožce člověka určuje nejen barvu, ale také míru rizika, kterému je uživatel vystaven, používá-li formu epilace využívající světlo, bez ohledu na to, o kterou z nich se jedná. Čím tmavší pokožka, tím vyšší riziko.

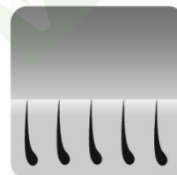

Před ošetřením IPL epilátorem



Během světelného pulzu vyzařovaného IPL epilátorem

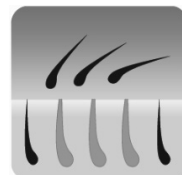

Po ošetření IPL epilátorem

VLIV CYKLU RŮSTU CHLOUPKŮ NA FOTOEPILACI

Melanin je pigment nacházející se v chloupcích, který umožňuje absorpci světla a jeho následnou přeměnu na teplo, aby se zastavil růst chloupků. Čím více melaninu v chloupku, tím je tmavší jeho zbarvení a tím více světla dokáže absorbovat, čímž se zvyšuje účinnost fotoepilace.

Životní cyklus chloupků má tři fáze - anagenní, katagenní a telogenní. Tyto tři fáze hrají důležitou roli v procesu fotoepilace. Anagenní fáze je růstová fáze chloupku, zatímco katagenní a telogenní fáze jsou klidové fáze. Růstový cyklus chloupku se pohybuje v rozmezí 18-24 měsíců.

Většina vlasových folikulů se nachází v jedné ze dvou klidových fází. Technologie IPL je účinná pouze v době, kdy se chloupky nacházejí v růstové fázi. V růstové fázi se nikdy nenacházejí všechny chloupky současně. Pro trvalé odstranění chloupků je proto nezbytné porozumět růstovému cyklu folikulů.

Tři fáze - anagenní, katagenní a telogenní



Růstová fáze -
anagenní



Přechodná fáze -
katagenní



Klidová fáze -
telogenní

IPL epilátor nabízí bezpečnou a dlouhotrvající epilaci v soukromí a pohodlí vašeho domova.

Odstraňuje z pokožky nechtěné chloupky, zejména z pokožky nohou a rukou, dále z citlivých partií, jako jsou podpaží, oblast bikin a obličej (tváře, horní ret, brada).

Spotřebiči mohou používat muži i ženy starší 18 let.

Pokud si nejste jisti, zda můžete epilátor použít, obraťte se na svého dermatologa či praktického lékaře.

PŘÍPRAVA POKOŽKY

- Před použitím přístroje musí být pokožka oholená, čistá, suchá a bez zbytků deodorantu či jiné kosmetiky.
- Před použitím IPL epilátoru neodstraňujte chloupky elektrickým epilátorem nebo voskem. Epilace (odstranění chloupků i s kořínkem) způsobí, že epilace IPL epilátorem nebude účinná.
- Nevystavujte se slunečnímu záření 4 týdny před použitím epilátoru a 2 týdny po jeho použití. Vhodná ochrana proti slunečnímu záření je oděv, který dostatečně zakrývá pokožku, nebo opalovací krém (s minimálním ochranným faktorem 50). Ochranu je vhodné používat pravidelně 3 týdny před a po ošetření.
- Pokud jste na pokožku aplikovali samoopalovací krém, počkejte před

použitím epilátoru, dokud opalovací účinek krému zcela nevymizí.

- Před použitím přístroje vždy zakryjte tetování, mateřská znaménka či tmavá znaménka, jako jsou pihy, névy, bradavice či nádory.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na bradavky ani na genitálie (dámské ani pánské).
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na žádné části těla, kde byste později chtěli mít chloupky.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k jinému účelu, než je odstraňování chloupků.
- Před uvolněním impulsu se vždy ujistěte, že spotřebičem míříte na ošetřovanou část pokožky a že se jí úplně dotýkáte.

NASTAVENÍ IPL EPILÁTORU

1. Vyměňte přístroj a veškeré příslušenství z krabice.
2. Kabel síťového adaptéru zapojte do zásuvky.
3. Zapojte adaptér.
4. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a spotřebič zapněte. Rozsvítí se indikátor připravenosti a úroveň 1. Uslyšíte slabý hluk ventilátoru.
5. Spotřebič je připraven k použití.
6. Zvolte intenzitu, která odpovídá vašemu typu pokožky. Pomocí tlačítka zapnout/vypnout zvolte požadovanou intenzitu. Chcete-li například přejít z úrovně 1 na úroveň 4, opakovaně stiskněte tlačítko zapnout/vypnout, dokud nedosáhnete požadované intenzity. Spotřebič postupně zvyšuje úroveň ze 4 na 5, poté zpět z úrovně 5 na 4, 3, 2 až na úroveň 1.
7. Aplikací plochu spotřebiče přitiskněte na pokožku. Jakmile je spotřebič v kontaktu s pokožkou, indikátor připravenosti začne blikat.
8. Spotřebič má mechanismus, který během použití chrání oči. Kontaktní senzor brání vyslání impulsu, pokud aplikační plocha přístroje není zcela v kontaktu s pokožkou. Proto se vždy ujistěte, že je spotřebič na pokožce správně umístěn.
9. Tlačítko uvolnění impulsu - stisknutím tlačítka spotřebič vyšle světelný impuls, přičemž můžete ucítit mírný pocit tepla či brnění.
10. Sejměte epilátor z ošetřované části pokožky.
11. Aplikací plochu spotřebiče posuňte na další část pokožky, kterou chcete ošetřit. Tlakové značky, které na pokožce zůstaly po použití epilátoru, vám pomohou správně zvolit místo další aplikace světelného impulsu tak, aby se předešlo uvolnění dvou impulsů na stejném místě nebo příliš velkému rozestupu mezi ošetřovanými místy. Spotřebič se po každém vypuštění impulsu okamžitě dobije. Po uplynutí 1,6 sekundy (při intenzitě 1) se

indikátor připravenosti opět rozsvítí. Spotřebič je nyní připravený vypustit další impuls.

Upozornění: Stejnou část pokožky během jednoho použití neošetřujte více než jednou. Opakované ošetření stejné části pokožky zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků.

REŽIMY

Režim PRECISION (přesný)

Režim Precision (popsán v odstavci výše) umožňuje bezpečné ošetření nejhůře dostupných a nejcitlivějších partií, jako je obličej, podpaží, oblast bikin apod.

Režim GLISS

Jakmile je aplikační plocha spotřebiče správně přiložena k pokožce a tlačítko uvolnění impulsu držíte stlačené, můžete aktivovat režim Gliss (nepřetržitě uvolňování 36 pulzů za minutu, na úrovni intenzity 1). Tímto způsobem dochází k automatickému plynulému uvolňování impulsů bez nutnosti další manipulace. Přístroj tak snadno můžete bez přerušení posunovat po pokožce pomalým a nepřetržitým pohybem, aniž byste jej zvedali a opět přikládali k pokožce.

Pokud spotřebič zvednete a stále držíte stlačené tlačítko uvolňování impulsů, režim Gliss zůstává aktivní. Z důvodu bezpečnosti však nedojde k uvolnění impulsu, dokud nebude přístroj v plném kontaktu s pokožkou. Dejte pozor, aby kontaktní senzor, který je po obvodu aplikační plochy spotřebiče, byl pevně přitlačen k pokožce tak, aby byla zaručena funkce nepřetržitých záblesků v režimu Gliss. Pokud přerušíte kontakt mezi aplikační plochou spotřebiče a pokožkou, máte 5 sekund na to, abyste spotřebič opět přiložili k pokožce a pevně přitiskli, zatímco držíte stisknuté tlačítko uvolnění impulsu. Pokud po 5 sekundách spotřebič není v plném kontaktu s pokožkou, režim Gliss se deaktivuje, budete muset pustit tlačítko uvolňování impulsu a dalším stisknutím proces restartovat.

Pokud spotřebič zvednete a pustíte tlačítko uvolnění impulsu, režim Gliss se deaktivuje.

Režim Gliss je vhodný pro uživatele, kteří již mají nějaké zkušenosti s používáním zařízení a mají určitou zručnost. Díky 36 impulsům za minutu (stupeň intenzity 1) režim Gliss umožňuje bezpečněji a rychleji ošetřovat větší plochy pokožky, jako jsou nohy, záda, paže, trup atd. K ošetření citlivých partií a pokožky obličeje používejte režim Precision.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Pokud spotřebič déle než 10 minut nepoužíváte, automaticky se vypne a světelný indikátor se rozsvítí oranžově. Pokud chcete spotřebič opět uvést do provozu, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a nastavte požadovaný výkon.

POKRYTÍ OŠETŘOVANÉ POKOŽKY

Při uvolňování impulsů postupujte systematicky v po sobě jdoucích řadách. Tato metoda zajistí lepší kontrolu impulsů, pomůže lépe pokrýt danou oblast a zároveň zabrání ošetření stejného místa dvakrát nebo aplikaci impulsů příliš blízko vedle sebe.

Tlakové značky, které na pokožce zůstávají po použití epilátoru, vám pomohou správně zvolit místo další aplikace světelného impulsu tak, aby se předešlo uvolnění dvou impulsů na stejnou plochu pokožky nebo příliš velkému rozestupu mezi ošetřovanými místy. Vyvarujte se uvolnění více než jednoho pulzu na stejnou část pokožky během jednoho ošetření.

Objeví-li se na pokožce popáleniny či puchýře, epilaci okamžitě přerušte.

EPILACE OBLIČEJE

- Během vysílání impulsu se nedívejte přímo na ošetřovanou oblast.
- Přístroj nepoužívejte k epilaci řas, obočí ani vlasů.
- Přístroj není vhodný k celkovému odstranění mužských vousů.
- Z důvodu vašeho pohodlí a bezpečnosti doporučujeme, abyste během několika prvních ošetření měli po ruce někoho, kdo vám pomůže.
- Pro epilaci chloupků na obličeji použijte režim PRECISION. K OŠETŘENÍ POKOŽKY OBLIČEJE A CITLIVÝCH PARTIÍ NEPOUŽÍVEJTE REŽIM GLISS.
- Při ošetření obličeje je nezbytné, abyste mezi jednotlivými impulsy 5 sekund počkali. Doba ošetření pokožky obličeje by neměla trvat déle než 10 minut.

DOBA TRVÁNÍ JEDNOHO OŠETŘENÍ

Oblast	Průměrná doba trvání	Režim
Polovina nohy	8 až 10 minut	Gliss
Celá noha	15 minut	Gliss
Oblast bikin	2 minuty	Precision
Podpaží	1 minuta	Precision

VOLBA INTENZITY

Úroveň intenzity označuje sílu pulzního světla aplikovanou na pokožku v průběhu ošetření. Ta se pohybuje od nejnižšího stupně (I) po nejvyšší stupeň (5).

Světelný indikátor ukazuje zvolenou úroveň intenzity. Pokud zvýšíte výkon, dosáhnete lepších výsledků, ale zvýší se riziko vzniku nežádoucích účinků (viz kapitola Možné nežádoucí účinky).

Upozornění: Pokud během 48 hodin po testovacím ošetření nezaznamenáte žádné abnormální reakce nebo nepohodlí, můžete vybrat úroveň výkonu epilátoru pro první ošetření podle níže uvedené tabulky:

- Fototyp pleti I a II - Na první ošetření nastavte přístroj maximálně na 3. úroveň intenzity. Pokud nezaznamenáte žádné potíže, můžete postupně během několika příštích ošetření navýšit intenzitu na úroveň 4 a poté na úroveň 5.
- Fototyp pleti III a IV - Na první ošetření nastavte přístroj maximálně na 2. úroveň intenzity. Pokud nezaznamenáte žádné potíže, můžete postupně během několika příštích ošetření navýšit intenzitu na úroveň 3 a poté na úroveň 4.
- Fototyp pleti V - Na první ošetření nastavte přístroj maximálně na 1. úroveň intenzity. Pokud nezaznamenáte žádné potíže, můžete postupně během několika příštích ošetření navýšit intenzitu na úroveň 2 a poté na úroveň 3.
- IPL epilátor není vhodný pro použití osobami s fototypem pleti VI.

Upozornění: Před použitím spotřebiče si přečtete celý návod k obsluze a v tabulce s fototypy níže vyberte bezpečnou úroveň výkonu pokaždé, když provádíte ošetření.

Pro bezpečné použití spotřebiče musí být spolu s níže uvedenou tabulkou

použit výše zmíněný průvodce výběrem intenzity.

Fototypy (podle Fitzpatricka):

- I Velmi bledá, mléčná pokožka - nikdy se neopálí a vždy se spálí
- II Světlá pokožka - málo se opálí a obvykle se spálí
- III Krémová pokožka - středně se opálí, někdy se spálí
- IV Světle hnědá pokožka - snadno se opálí a málokdy spálí
- V Tmavě hnědá pokožka - velmi snadno se opálí a jen zřídka se spálí
- VI Černá pokožka

FOTOTYPY	I	II	III	IV	V	VI
TESTOVACÍ OŠETŘENÍ (provádí se 48 hodin před prvním ošetřením)	Úroveň 1	Úroveň 1	Úroveň 1	Úroveň 1	Úroveň 1	X
První ošetření	Úroveň 3	Úroveň 3	Úroveň 2	Úroveň 2	Úroveň 1	X
Následující ošetření	Úroveň 4, 5	Úroveň 4, 5	Úroveň 3, 4	Úroveň 3, 4	Úroveň 2, 3	X

X - Spotřebič není vhodný pro použití osobami s fototypem pleti VI.

Je možné, že požadovaná úroveň intenzity se bude lišit v závislosti na rozdílu v barvě pokožky na jednom místě, které má být ošetřeno. Například pokožka na rukách, která je vystavena slunci obvykle častěji, je tmavší než vnitřní část paže. Avšak při zvyšování intenzity na světlejších partiích těla buďte opatrní. Sice dosáhnete lepších výsledků, zvýšíte tím ale riziko vzniku nežádoucích účinků.

ČETNOST OŠETŘENÍ

Délka růstového cyklu chloupku se průměrně pohybuje v rozmezí 18-24 měsíců, během nichž bude k dosažení dlouhodobých výsledků zapotřebí mnoho ošetření epilátorem. Efektivita spotřebiče se mezi jednotlivými uživateli bude lišit v závislosti na ošetřované části těla, barvě chloupků a způsobu aplikace.

Níže je uveden příklad naplánované četnosti ošetření během jednoho růstového cyklu chloupku:

- První 4 ošetření epilátorem by měla být v rozestupu 2 týdnů.
- Následující ošetření by měla být v rozestupu 4 týdnů, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

První měsíc

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Druhý měsíc

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Třetí měsíc

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Čtvrtý měsíc

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Pátý měsíc

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Poté epilátor použijte v případe, že chloupky znovu narostou, a to do té doby než dosáhnete trvalého účinku epilace. Mezi jednotlivými ošetřeními udržte odstup minimálně 4 týdny.

Upozornění: Stejnou část pokožky neošetřujte častěji než jednou za 2 týdny. Častější ošetření výsledek nezlepší, naopak zvýšíte riziko vzniku nežádoucích účinků.

Jakmile dosáhnete požadovaného stavu, můžete si napláňovat podpůrná ošetření pro jeho udržení.

Z důvodu hormonálních či fyziologických změn může dojít k opětovné aktivaci nečinných folikulů. Proto je někdy potřeba napláňovat ještě dodatečná ošetření.

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

Výsledek je patrný po prvních 4 ošetřeních a výrazného poklesu počtu chloupků se dosáhne po 9-10 ošetřeních. Výsledek se bude lišit v závislosti na typu chloupků a biologických faktorech, které ovlivňují růstový cyklus chloupků. Dlouhodobé výsledky nelze očekávat po jednom či dvou ošetřeních. Délka klidové fáze růstu chloupku se liší v závislosti na části těla.

Upozornění: Odstraňování chloupků epilátorem není efektivní, pokud jsou chloupky bílé či světlé.

PO EPILACI

- Po dokončení ošetření vypněte přístroj stisknutím tlačítka zapnout/vypnout.
- Napájecí kabel vypojte ze zásuvky.
- Po každém použití doporučujeme spotřebič vyčistit, zejména povrch aplikační plochy.
- Po vyčištění doporučujeme uskladnit v původní krabici a mimo dosah vody.

- Nevystavujte ošetřenou oblast slunci. Chraňte pokožku před sluncem v průběhu celého ošetření a nejméně dva týdny po posledním ošetření epilátorem. Vystavení slunečnímu záření znamená pobyt na přímém slunečním světle bez ochrany po dobu asi 15 minut nebo pobyt na nepřímém slunečním světle bez ochrany po dobu 1 hodiny.
- Po epilaci na pokožku nenanášejte deodorant ani parfémované krémy.

BEZPEČNOST

Technologie intenzivního pulzního světla (IPL) poskytuje současně maximální bezpečnost a minimální riziko.

Epilátor využívá technologii intenzivního pulzního světla, díky které dosáhnete dlouhotrvajících výsledků s menší intenzitou v porovnání s jinými metodami odstraňování chloupků za použití světla. Nízká spotřeba energie snižuje pravděpodobnost vzniku zranění nebo komplikací a přispívá k vaší celkové bezpečnosti.

Mechanismus na ochranu očí

IPL epilátor má zabudovaný mechanismus (kontaktní senzor), který chrání vaše oči. Přístroj je navržen tak, aby impuls nemohl být vyslán, pokud spotřebičem míříte do volného prostoru. Bezpečnostní mechanismus umožňuje vyslat impuls pouze tehdy, když se spotřebič přímo dotýká pokožky.

Při volbě intenzity během každého ošetření spotřebičem postupujte pečlivě podle pokynů uvedených v návodu.

Volba nevhodné intenzity může způsobit nežádoucí účinky. Podrobnější informace o výběru intenzity naleznete v kapitole Použití, v části Volba intenzity.

Stejnou část pokožky během jednoho použití neošetřujte více než jednou. Pokud se na pokožce objeví popáleniny či puchýře, okamžitě přestaňte.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud spotřebič používáte v souladu s uvedenými pokyny, nežádoucí účinky a komplikace jsou vzácné. Nicméně všechna kosmetická ošetření včetně těch, která jsou určena pro domácí použití, s sebou nesou určitá rizika. Proto je důležité porozumět a akceptovat tato rizika a možné komplikace spojené s domácím použitím IPL epilátoru.

Nežádoucí účinky	Četnost projevu nežádoucího účinku
Mírné nepohodlí / nepříjemný pocit na pokožce	Občas
Zarudnutí	Občas
Přecitlivělost pokožky	Občas
Popáleniny nebo poranění	Vzácně
Zjizvení	Vzácně
Změna pigmentace	Vzácně
Nadměrné zarudnutí pokožky a otok	Vzácně
Infekce	Zanedbatelné
Pohmožděnění	Zanedbatelné

Mírné nepohodlí / nepříjemný pocit na pokožce

Přestože je odstraňování chloupků spotřebičem obecně dobře snášeno, většina uživatelů epilátoru pociťuje mírné nepříjemný pocit, často popisovaný jako pocit píchání v místě ošetření. Obecně tento pocit přetrvává po celou dobu aplikace. Dokonce i několik minut poté. Jakýkoliv jiný nepříjemný pocit, než výše uvedený, není obvyklý a značí, že musíte ošetření přerušit, nebo musíte snížit zvolený výkon.

Zarudnutí

Pokožka ošetřená epilátorem může po použití nebo v následujících 24 hodinách zčervenat. Zarudnutí obvykle zmizí do 24 hodin. Pokud zarudnutí přetrvává déle než 2-3 dny, kontaktujte svého lékaře.

Přecitlivělost pokožky

Pokožka je citlivější v místě, které bylo ošetřeno, a může být vysušená nebo se loupat.

Popáleniny nebo poranění

Velmi zřídka se na pokožce po aplikaci může objevit popálenina či poranění. Může trvat několik týdnů, než se pokožka zcela zahojí, a v některých výjimečných případech může zůstat jizva.

Zjizvení

Přestože jsou tyto případy velmi vzácné, mohou se objevit trvalé jizvy. Jizvy obecně mívají podobu bělavé povrchové léze (hypotrofické). Jizva však může být velká a červená (hypertrofická) nebo velká a přesahující poraněnou oblast (keloidní). V takovém případě může být ke zlepšení vzhledu zapotřebí podstoupit pokročilejší kosmetický zákrok.

Změna pigmentace

Epilátor se zaměřuje na vlasové kořínky, zejména na pigmentové buňky vlasové cibulky. Nicméně existuje riziko dočasné hyperpigmentace (nárůstu hnědého pigmentu nebo zabarvení) nebo depigmentace (zesvětlení) okolní pokožky. Riziko změny pigmentace je vyšší u osob s tmavší pokožkou.

Obecně jsou změny pigmentace a zabarvení dočasné. Případy trvalé hyperpigmentace nebo depigmentace jsou vzácné.

Nadměrné zarudnutí pokožky a otok

V některých vzácných případech může ošetřovaná pokožka silně zarudnout a otéci. Tato reakce se častěji projevuje na pokožce citlivých partií. Zarudnutí a otok by měly vymizet během 2-7 dnů, během nichž byste měli na postiženou oblast pravidelně přikládat ledové obklady. Šetrné čištění nepředstavuje problém, měli byste se však vyhnout jakémukoli pobytu na slunci.

Infekce

Kožní infekce je extrémně vzácná, ale může nastat jako důsledek vzniku popáleniny či léze po ošetření epilátorem.

Pohmoždění

Velmi zřídka může spotřebič způsobit modré či fialové pohmoždění, které mohou přetrvávat po dobu 5 až 10 dnů. Jak mizí modrá barva pohmoždění, může se pokožka zbarvit do rezava (hyperpigmentace), tato změna může být trvalá.

Pokud během nebo po ošetření epilátorem pociťujete přetrvávající diskomfort či podráždění, poradte se se svým lékařem.

KONEC ŽIVOTNOSTI SPOTŘEBIČE

Když dojde spotřebič ke konci své životnosti, rozsvítí se indikátor připravenosti červeně.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylenu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.